

JALUPRO® *

DIN
2005

STIMULATOR DE COLAGEN



TERAPIA SUPLIMENTĂRII
CU AMINOACIZI

MAI MULT DE
1 MILION DE TRATAMENTE
EFECTUATE

* Litera j a fost folosită în limba italiană până la sfârșitul secolului XX. Mai mult a fost folosită la începutul cuvântului în loc de i dacă a fost urmată de vocală (ja și nu ia). Ambele litere sunt pronunțate în același mod.
JAL = IAL = Hyal

 **PROFESSIONAL**
DERMA



BIOREVITALIZARE

Recuperarea funcțiilor vitale cutanate este un pas esențial în tratamentul crono și foto-îmbătrânirii. Pentru a realiza acest proces, definit prin biorevitalizare, studiile științifice detaliate au demonstrat eficiența combinării aminoacizilor (Glicina, L-prolina, L-lizina, L-leucina) cu acidul hialuronic, fiind o terapie eficientă. JALUPRO, JALUPRO HMW (injectabile) au fost generate având în vedere acest lucru.

REZULTATELE TESTELOR CLINICE




- Asigură chemotaxia
- Proliferarea fibroblastelor
- Reduce rata de degradare a colagenului
- Stimulează neocolageneza
- Stimulează producerea factorilor de creștere (TGF β)

JALUPRO®

STIMULATOR DE COLAGEN

TERAPIA SUPLIMENTĂRII CU AMINOACIZI

GRUP FUNCȚIONAL DE AMINOACIZI

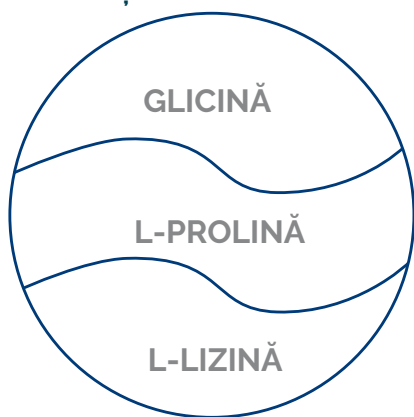

70% din structura colagenului

STIMULEAZĂ ACTIVITATEA
METABOLICĂ A FIBROBLASTELOR,
CREȘTE PRODUCȚIA ȘI ÎNCURAJEAZĂ
SINTEZA DE COLAGEN NOU

COMPONENTELE MATRICEI EXTRACELULARE



ASIGURĂ MENȚINEREA NIVELULUI
OPTIM DE HIDRATARE ȘI CREEAZĂ
SUPPORTUL MOLECULAR CE DUCE
LA CREȘTEREA ELASTICITĂȚII
PIELII

*Referințe: (1) Dr. Adele Sparavigna, Dr. Riccardo Forte, Dr. Francesco Saverio Dioguardi - " Multicenter study of the evaluation of tolerance and efficacy of a new integrated aminoacid treatment on the aging face". Journal of Plastic Dermatology, International-Italian Society of Plastic - Aesthetic and Oncologic Dermatology (September-December 2007) (2) Dr. Francesco Saverio Dioguardi - "Nutrition and skin. Collagen integrity: a dominant role for amino acids" Clinics in Dermatology, the Official Journal of the International Academy of Cosmetic Dermatology (2007) (3) Prof. A. Trulli, "G.D'Annunzio" University, Chieti-Pescara: Study project for the evaluation of the performance on skin blemishes of the face and of the safety of an extemporaneous mixture of hyaluronic acid and amino acids as adjuvants with accessory activity (JALUPRO) for intradermal implants". (4) Derming, Institute of Clinical Research and Bioengineering - Monza (Mi): "Multicenter clinical and instrumental study for the evaluation of efficacy and tolerance of an intradermal injectable product as a biorevitalizer for the aging face." (5) Derming, Institute of Clinical Research and Bioengineering - Monza (Mi): Controlled study for clinical and instrumental evaluation of bio-revitalizing, soothing and reconstruction efficacy of an intradermal injectable product (JALUPRO) combined to chemical peeling on aging face". (6) Barini C., CostarellaM., Forte R.:"Thermage e supplementazione aminoacida Jalupro: proposta di protocollo". - Giovanni Corsetti, Giuseppe D'Antona, Francesco Saverio Dioguardi, Rita Rezzani - " Topical application of dressing with Amino Acids improves cutaneous wound healing in aged rats". Acta Histochemica, Volume 112 - 2010. - M.A Mariggio, A. Cassano, A. Vinella, A. Vincenti, R. Fumarulo, L. Lo Muzio, E. Maiorano, D. Ribatti, G. Favia. - Enhancement of fibroblast proliferation, collagen biosynthesis and production of growth factors as a result of combining sodium hyaluronate and aminoacids. International Journal of Immunopathology and Pharmacology, Vol. 22, no 2, 485-492 (2009) - G. Favia, M.A. Mariggio, E. Maiorano, A. Cassano, S. Capodiferro, D. Ribatti - "Accelerated Wound healing of oral soft tissues and angiogenic effect induced by a pool of Amino Acids combined to sodium hyaluronate (Aminogam)". Journal of biological regulators and homeostatic agents, Vol 22, no. 2, 109-116 (2008). - Giuseppe Colella, Antonio Vicidomini, Nicola Cirillo, Giovanni Maria Gaeta, Salvatore D'Amato - "Aminoacid- enriched sodium hyaluronate enhances keratinocyte scattering, chemotaxis and wound healing through integrin β 1-dependent mechanisms". The Journal of stomatological investigation, Vol 3, no 1, 21-29 (2009)



dermatologii estetycznej

2019



Dispozitiv Medical Clasa III

CE 0373

JALUPRO®

TERAPIA SUPLIMENTĂRII CU AMINOACIZI

JALUPRO®

Restabilește luminozitatea, densitatea și fermitatea pielii, previne și estompează flaciditatea cutanată (fața și corp), reduce ridurile fine și de expresie, previne elastoza cutanată, îmbunătățește aspectul cicatricelor (inclusiv cicatricile post acneice), cheloide și a vergeturilor.

CUM ESTE FURNIZAT PRODUSUL?

2 flacoane ce conțin 100 mg de aminoacizi liofilizați (Glicina, L-prolina, L-lizina, L-leucina) (A) și 2 fiole sterile ce conțin 30 mg/3 ml acid hialuronic (B)

INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul trebuie reconstituit înainte de utilizare: dizolvați fiola cu acid hialuronic (B) în flaconul cu aminoacizi (A). Rezultatul va fi o soluție transparentă, fără particule, ce garantează o distribuire uniformă și sigură a substanțelor active în zonele dorite. Cocktail-ul obținut este doza ideală pentru un tratament complet (față și/sau gât sau o zonă a corpului).

JALUPRO® ESTE TESTAT CLINIC

FRECVENȚA DE TRATAMENT JALUPRO



Este posibilă efectuarea mai multor proceduri la recomandarea medicului.

TEHNICA DE INJECTARE RECOMANDATĂ

Soluția poate fi injectată în dermul papilar sau reticular cu oricare tehnică. Este recomandată folosirea unui ac 30g.



VOLUM
2,5ml

Dispositiv Medical Clasa III

CE 0373

JALUPRO®

TERAPIA SUPLIMENTĂRII CU AMINOACIZI

JALUPRO® HMW

Studiile au demonstrat eficiența biorevitalizării în zonele cutanate afectate (riduri fine, medii și profunde, în special cele ale gâtului și decolteului).

CUM ESTE FURNIZAT PRODUSUL?

1 seringă de unică folosință, de sticlă, apirogenă, preumplută cu gel steril, care conține 20 mg de acid hialuronic (A), plus un flacon de 80 mg de soluție sterilă pe bază de aminoacizi (Glicina, L-prolina, L-lizina, L-leucina) (B). Cutia nu conține ac.

INDICAȚII DE UTILIZARE

Produsul trebuie reconstituit înainte de procedură: După aplicarea unui ac 27 G la seringă, injectați gelul în flaconul cu aminoacizi, apoi agitați flaconul până se obține o soluție cu o vâscozitate moderată. Cantitatea produsului ce trebuie injectată depinde de diferiți factori (profundimea ridurilor, gradul de îmbătrânire a pielii etc.) și experiența medicului.

JALUPRO® HMW ESTE TESTAT CLINIC

FRECVENȚA DE TRATAMENT JALUPRO HMW



Este posibilă efectuarea mai multor proceduri la recomandarea medicului.



TEHNICI DE INJECTARE RECOMANDATE

Soluția poate fi injectată prin tehnicile: lineară, micro-papule, evantai, rețea, mixtă. Este indicată folosirea unui ac 30 G.

Starea pielii înainte și după folosirea tratamentului JALUPRO evaluat prin microscopie confocală cu scanare laser: înainte (a, c) și după (b, d)



Pacient I, 48 ani

- A- Săgețile indică grupurile de fibre de colagen în dermul papilar și reticular
B- Săgețile indică zonele unde este posibilă apariția formării de noi fibre.

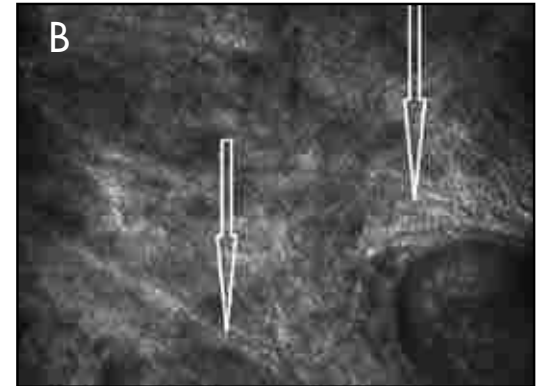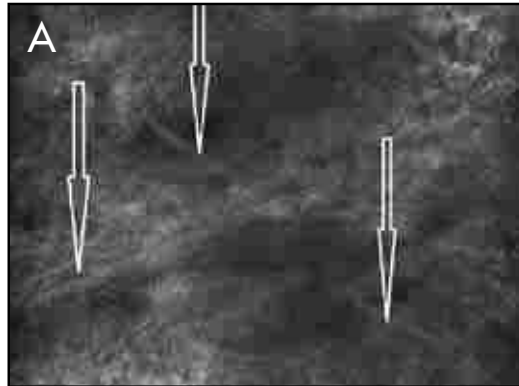

Pacient K, 60 ani

- C- Săgețile indică grupurile de fibre de colagen în dermul papilar și reticular
D- Săgețile indică zonele unde este posibilă apariția formării de noi fibre.

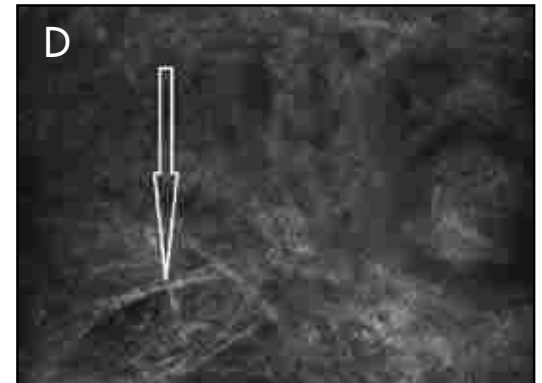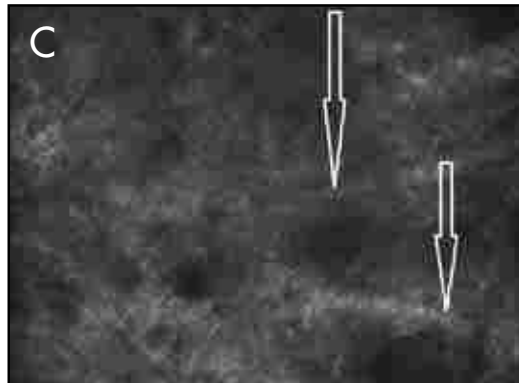


JALUPRO®

TERAPIA SUPLIMENTĂRII CU AMINOACIZI

ÎNAINTE



DUPĂ

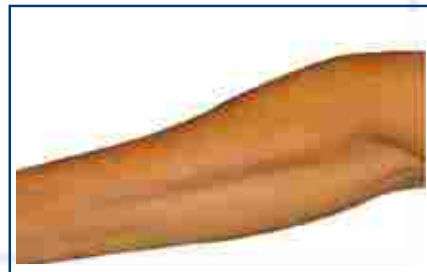

Grație Dr. Daria Danza, MD, Dermatolog și Tricolog

Protocolul de folosire a tratamentelor JALUPRO® și JALUPRO® HMW

FAȚĂ / GÂT

PIELE FLASCĂ, SEMNE DE ÎMBĂTRÂNIRE: JALUPRO®



RIDURILE FRONTALE, RIDURILE „LABA GÂȘTEI”, RIDURILE PERIORALE, PLIURILE NAZOLABIALE, "RIDURI DE MARIONETĂ", RIDURILE MENTONIERE, RIDURILE GÂTULUI : **HMW**



Este posibilă efectuarea mai multor proceduri la recomandarea medicului.

CORP

PIELEA FLASCĂ A BRAȚELOR ȘI COAPSE INTERN, LAXITATEA PIELII GENUNCHIULUI, LAXITATEA PIELII ABDOMINALE: JALUPRO®



Este posibilă efectuarea mai multor proceduri la recomandarea medicului.

PROTOCOALE SPECIALE

CONTURUL OCHILOR: 1ML DE AH DE LA JALUPRO ȘI UN FLACON DE AMINOACIZI LIOFILIZAȚI (0,5 ml pentru fiecare parte)



CICATRICI CHELOIDE: 0,2 – 0,5 ml de HA DE LA JALUPRO ȘI UN FLACON DE AMINOACIZI LIOFILIZAȚI



Este posibilă efectuarea mai multor proceduri la recomandarea medicului.

P R P

Plasmă Îmbogățită cu Plachete (PRP): ADĂUGAȚI UN FLACON DE AMINOACIZI LA SERUL PRP DUPĂ CENTRIFUGARE

SAU



FILLER

JALUPRO® sau JALUPRO® HMW

Primul tratament JALUPRO®

10 ZILE

Al 2-lea tratament JALUPRO®

10 ZILE


Al 3-lea tratament JALUPRO®

10 ZILE

Al 4-lea tratament FILLER

JALUPRO și JALUPRO HMW combinate cu tratamente laser sau micro-needling oferă efecte și rezultate mult mai stabile.

JALUBOTOX *Protocolul Dr. Piovano*

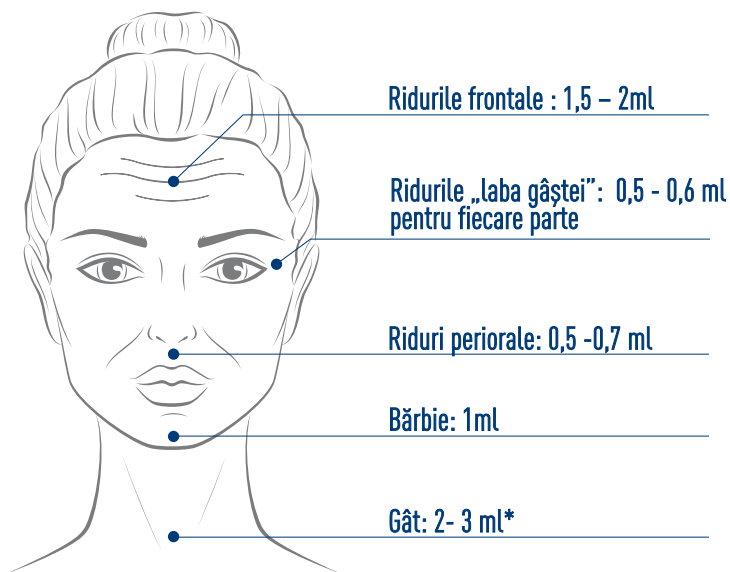

*numai pentru gât doza se poate mări până la dublarea unităților de botox

JALUBOTOX

15 ZILE

JALUPRO

15 ZILE


JALUPRO

A NU SE REPETA JALUBOTOX MAI DEVREME DE 3 LUNI

Vă recomandăm să tratați următoarele zone: **RIDURILE FRONTALE (excluzând glabela), RIDURILE „LABA GÂȘTEI” , RIDURILE PERIORALE, BĂRBIĂ ȘI GÂTUL**

- 1 Diluați toxina botulinică cu soluție salină (F.I. 100 U Onabotulinum în 1 ml sau 1,25 ml sau 300 U Abobotulinum în 1,5 sau 500 U în 2,5 ml)
- 2 Diluați Jalupro® conform indicațiilor din instrucțiuni (3 ml de AH cu pulbere de aminoacizi liofilizați)
- 3 Folosiți 2 seringi luer-lock pentru a amesteca Jalupro® și BTX: luați 1 ml de Jalupro® în seringă de 2,5 ml și 8-10 U de Onabotulinum sau 20-25 U de Abobotulinum într-o seringă de 1 ml, conectați cele două seringi cu un conector și omogenizați-le.
- 4 Injectați cocktail-ul în dermul superior sub formă de micropapule. Aceeași cantitate de injecție pe partea dreaptă și stângă pentru a evita asimetria.

ÎNAINTE

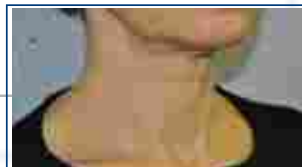

DUPĂ



Grație Dr. Luca Piovano, Chirurg Plastician

JALUPRO® *

Primul **BOOSTER DE COLAGEN** bazat pe
Aminoacizi și Acid Hialuronic

Produs în Italia



ITALTRADE & CO S.R.L.

Adresă: Str. Amman, nr. 2B, sector 1, cod poștal 011614,
București, România

Telefon fix: +4(021)316 50 70 / Telefon mobil: +40 731 361 550

E-mail: office@italtrade.ro

www.italtrade.ro

Jalupro



Jalupro
Official Account



Professional
Derma



PROFESSIONAL DERMA SA
Riva A.Caccia 1/d - 6900 - Lugano Switzerland
info@pderma.com